

SYSTÈME AVANCÉ DE
BLANCHIMENT DES DENTS

P
O
L
L
A

SDI

SDI

P
O
L
A

SYSTÈME AVANCÉ DE
BLANCHIMENT DES DENTS

Discutez avec votre patient d'un programme de blanchiment qui lui convient.



Au Cabinet

Pola Rapid

6% peroxyde d'hydrogène 3 ou 4 applications de 15 minute

À Domicile

Pola Day

6% peroxyde d'hydrogène 1 application de 45 minutes



Pola Night

Note : 1% de peroxyde d'hydrogène correspond à 2.77% de peroxyde de carbamide

10% peroxyde de carbamide 2 heures par jour à toute la nuit

16% peroxyde de carbamide 90 minutes par jour à toute la nuit



Pola for Aligners

10% peroxyde de carbamide 1 x 2 heures / jour par nuitée



Pola Light

6% peroxyde d'hydrogène 2 x10 ou 2 x 15 minutes de traitement quotidien.



En déplacement

Pola Luminare

6% peroxyde d'hydrogène Application de 2 x 30 minutes par jour



Dans les traitements

A woman with long, wavy blonde hair is sitting in a dark chair, wearing a black, sleeveless, form-fitting dress. She is looking towards the camera with a slight smile. The background is dark and out of focus. The text "en cabinet" is overlaid in white, lowercase letters across the center of the image.

en cabinet

Pola Rapid

Pola Rapid est le nouveau système d'éclaircissement au fauteuil qui éclaircit les dents en toute sécurité en seulement 45 minutes.

Une formule au peroxyde d'hydrogène à 6% qui assure une libération immédiate des principes actifs.

Indications:

1. Eclaircissement des dents vitales dyschromiées.
2. Eclaircissement des dents devitalisées dyschromiées.

Mise en œuvre et retrait facile

Le gel à haute viscosité s'applique facilement et s'élimine rapidement grâce à sa formule spéciale non collante. L'extrusion est rapide et facile et le gel ne coule pas après son application à la surface de la dent.

Un gel bleu pour une application toujours plus rapide

La teinte bleue de Pola Rapid améliore la visibilité et l'application. Le gel facile à appliquer et non collant permet aussi une élimination aisée.

Distribution simple et application précise

Pas besoin de mélanger. La seringue double assure un mélange automatique du gel qui est appliqué directement sur la dent. L'embout pinceau applicateur permet d'obtenir une couche régulière et précise.

Procédure simple

Pas de protection des tissus mous. Avec une préparation simple des dents et un temps de contact rapide par application, il réduit le temps passé au fauteuil et améliore la productivité.

Désensibilisant intégré

Pola Rapid bénéficie d'un désensibilisant intégré qui inhibe la sensibilité post-opératoire. Le nitrate de potassium, un neuro-dépolarisateur prévient contre les sensibilités et produit un effet calmant. La teneur élevée en eau garantit le confort du patient pendant et après le traitement.

Libération de fluor pour renforcer les dents

Pola Rapid contient du fluor qui aide à renforcer les dents et à les protéger contre la sensibilité.

S'utilise avec ou sans lampe de blanchiment

Pola Rapid peut être utilisé avec ou sans lampe de blanchiment car il n'a pas besoin de chaleur pour s'activer.







Traitements

A woman with long brown hair, wearing a dark blue, possibly silk, blazer with a deep V-neckline and a single button. She is looking slightly upwards and to the right. The background is dark and indistinct.

à domicile

Pola Day Pola Night





Libération de Fluor

Pola Day et Pola Night contiennent du fluor, qui aide à renforcer la dent pour la protéger contre les sensibilités.

Sûr et pratique

La formulation unique de Pola Day et Pola Night à haute teneur en eau et à pH neutre pour une protection optimale des dents et des gencives durant le traitement.

Un éclaircissement efficace

L'effet d'éclaircissement souhaité peut être obtenu en 30 minutes ou par une application la nuit pendant le sommeil. Il existe différents points forts du Pola Day et du Pola Night que les patients peuvent utiliser à la maison - utilisez le sélecteur pola pour choisir le produit qui convient le mieux à votre patient (disponible sur www.polawhite.com.au).

Quelle est la différence entre Pola day et Pola Night?

Pola Day consiste en une gamme de gels à base de peroxyde d'hydrogène spécialement conçus pour les patients qui souhaitent un résultat en un temps limité.

Pola Night est une gamme de gels à base de peroxyde de carbamide qui permet un résultat optimum pour les patients ayant des sensibilités.

Les deux gammes sont disponibles dans différentes concentrations dont les plus faibles sont spécialement indiqués en cas de sensibilités dentaires.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions étape par étape.

Pola For Aligners

Aligner et éclaircir en un seul geste

SDI présente le gel d'éclaircissement Pola For Aligners, idéalement formulé pour être utilisé avec les aligneurs orthodontiques.

Pola For Aligners est disponible en kit ambulatoire facile à utiliser garantissant aux patients des sourires plus blancs et plus lumineux sans qu'ils aient à porter leurs aligneurs plus longtemps.

Pola For Aligners procure les mêmes bénéfices que la formule d'éclaircissement Pola

- Le meilleur confort que puisse procurer un kit de blanchiment.
- Contient du nitrate de potassium et du fluorure qui aident à réduire la sensibilité pour une utilisation prolongée
- Gel à haute viscosité, ne coule pas et est facile à appliquer dans la gouttière

Disponible en kit de 4 seringues – pratique à transporter et appliquer de jour comme de nuit

- Le système Pola For Aligners est disponible en gel Pola Night à 10% de peroxyde de carbamide, soigneusement choisi pour être l'agent d'éclaircissement dentaire idéal à utiliser avec tous les systèmes de gouttières d'alignement. Il permet aux patients de l'utiliser selon leurs besoins.
- Selon la recherche clinique, le peroxyde de carbamide est le produit de référence en matière d'éclaircissement dentaire, offrant des résultats optimaux tout en assurant le confort et la sécurité des patients.*



PEUT S'UTILISER TOUTE LA NUIT SANS DANGER



FACILE A UTILISER



LIBÈRE DU FLUORURE



UTILISÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES PROFESSIONNELS



Pola Light

Un nouveau système d'éclaircissement ambulatoire doté d'une technologie a led

Un sourire plus éclatant et plus confiant en 5 jours seulement.

Pola Light est un système avancé d'éclaircissement ambulatoire des dents qui combine la formule d'éclaircissement déjà primée de Pola à une gouttière à LED pour un éclaircissement ambulatoire plus rapide.

- Le système Pola Light et le gel Pola Day se combinent parfaitement.
- Grâce à son action rapide, les dents sont plus blanches en 5 jours seulement.
- Une formule qui permet d'éliminer en toute sécurité les tâches présentes depuis longtemps.
- Entièrement rechargeable pour vos futurs traitements d'éclaircissement
- Reminéralisation pour renforcer vos dents
- Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions étape par étape.



EN 20 MINUTES PAR JOUR SEULEMENT

2 x10 ou 2 x 15 minutes de traitement quotidien.



FACILE À UTILISER

Portatif, rechargeable et facile à utiliser. Gouttière sans fil.

La gouttière Pola LED se constitue d'une double arcade et est de taille universelle.



DES DENTS PLUS BLANCHES EN CINQ JOURS

Durée du traitement 5 jours.

Pas de temps au fauteuil ou de gouttières à fabriquer, une économie de temps aussi bien pour le patient que le dentiste.




SYSTÈME PROFESSIONNEL D'ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE, UTILISÉ ET RECOMMANDÉ

Pola est un système professionnel d'éclaircissement des dents, fiable et recommandé par les dentistes pour un sourire plus confiant et plus éclatant en un temps record.

Les gels d'éclaircissement des dents à pH neutre et à haute viscosité garantissent un plus grand confort au patient pour un usage à domicile.

Son mélange unique d'agents apaisants, de conditionneurs et une haute teneur en eau contribue à réduire la sensibilité.

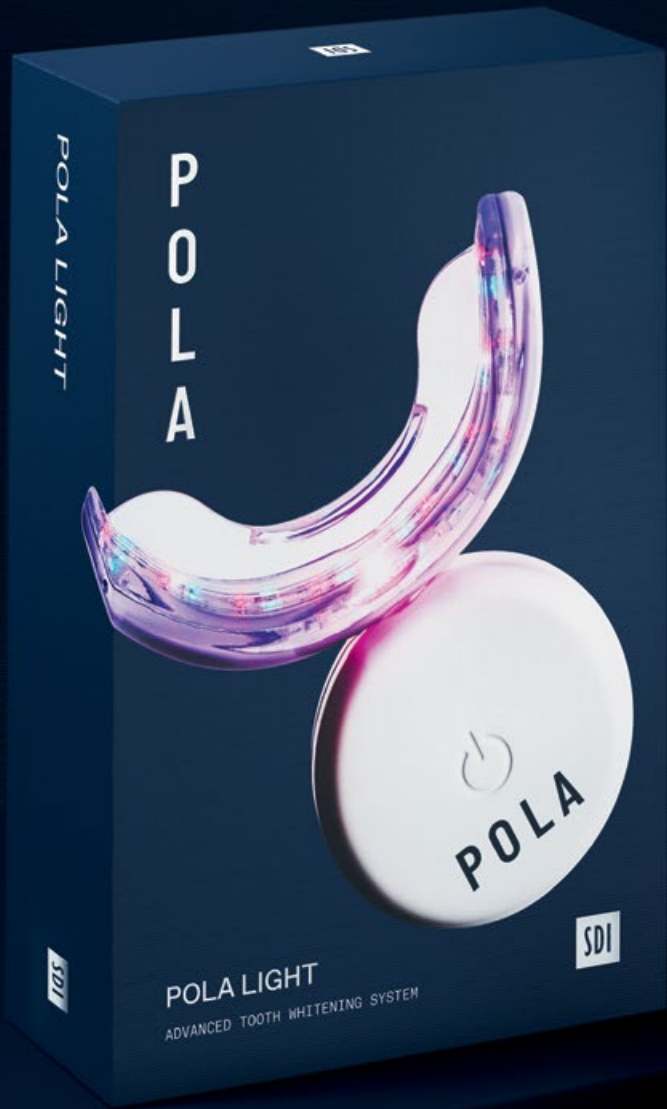



En déplacement



traitements

Pola Luminare




Pola Luminare est un système d'éclaircissement dentaire de type « vernis », aromatisé à la menthe et libérant du fluor. Vous pouvez appliquer Pola Luminare à tout moment en seulement quelques secondes. Emportez le partout avec vous! Pola Luminare est plus puissant que les produits disponibles dans les supermarchés ou les pharmacies, les résultats seront donc plus rapides! Pola Luminare est le produit idéal pour conserver votre nouveau sourire.



POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM



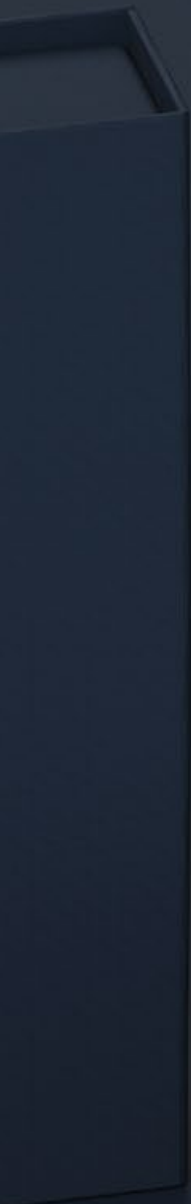

Pola Whitening Stand

Design simple

Le support de blanchiment Pola présente un design intelligent et ultramince qui supporte les lampes à polymériser Radium Plus et Radium Xpert.

Grande variété de mouvements et d'ajustements

Le support de blanchiment Pola dispose de cinq points de rotation qui vous permettent de l'ajuster jusqu'à 360° pour atteindre la position exacte requise.

Polyvalent

Le support peut être positionné à côté ou derrière le patient, selon la configuration du cabinet.

Équipé de roues

Le support est équipé de roues qui assurent une totale liberté de mouvement et de contrôle d'une pièce à l'autre.

Léger, sans fil et compact

Il est aisé de déplacer et de positionner le support grâce à son design léger et sans fil. Compact, le support est facile à nettoyer et peut être rangé aisément après utilisation.

Stabilité du système

Les freins du support garantissent que la base reste bien en place lorsque le support est utilisé.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions étape par étape.



CAS CLINIQUE



Dr Vijay Vadher
UK

Pola Night 16%



Dr Linda Greenwall
UK

Pola Night 10% CP for Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Spain

Pola Day 6%



**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%



F




A

Quelle est la cause d'une décoloration des dents ?

Les dents de chaque individu sont uniques, raison pour laquelle elles se décolorent et se tachent de diverses manières. La décoloration ou la coloration des dents d'une personne est généralement causée par le café, le thé noir, la tisane, le vin rouge, des aliments épicés tels que le curry ou la cigarette.

Comment fonctionne le blanchiment des dents ?

Lorsqu'un produit de blanchiment est appliqué sur les dents, il se décompose en eau et en ions d'oxygène. Les ions d'oxygène pénètrent l'émail et attaquent les longues molécules responsables des taches pour les décomposer efficacement afin de les raccourcir et de les rendre incolores. Ces molécules courtes et incolores disparaissent ensuite naturellement des dents grâce à la salive. L'intensité du blanchiment dépend du nombre d'ions disponibles et de la durée de leur présence sur la dent.

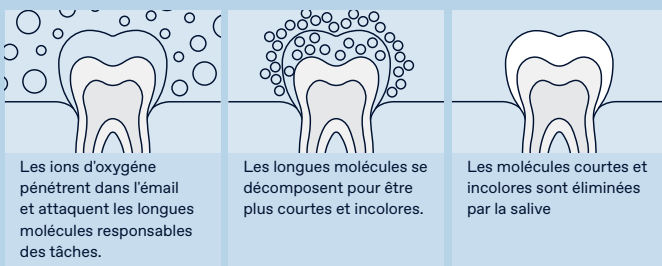

Combien de temps cela prend-t-il de blanchir les dents d'un patient ?

Avec un blanchiment en cabinet dentaire, on obtient des résultats en seulement 30 minutes de traitement. En recourant à un système de blanchiment à domicile, la durée du traitement varie entre 5 et 14 jours.

Q

Combien de temps durera le traitement de blanchiment ?

Cela dépend d'une personne à l'autre et des habitudes bucco-dentaires de chacun. Le blanchiment doit être répété tous les 6 à 12 mois pour les traitements en cabinet et à domicile. En l'absence de retouches, les dents de vos patients recommenceront à se tacher pour la même raison que celle qui a causé leur décoloration à l'origine.

Si le patient a subi des restaurations ou dispose de facettes, leur couleur sera-t-elle altérée ?

Le blanchiment enlèvera toute tache existante sur les restaurations, mais n'affectera pas la teinte d'origine.

Existe-t-il des effets secondaires ?

En suivant les instructions d'utilisation fournies avec les produits pola, la plupart des patients ne rencontrent pas d'effets secondaires. Toutefois, certains souffriront d'une un léger inconfort. Cette sensibilité s'estompera quelques heures après l'arrêt du traitement et n'entraînera aucun problème résiduel. Il est possible de raccourcir ou d'espacer dans le temps les durées d'application. Il est recommandé au patient de ne pas consommer de boissons gazeuses, d'agrumes et de boissons à base d'agrumes au cours de cette période.

Le blanchiment des dents est-il sans risque pour la femme enceinte ?

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits de blanchiment des dents durant la grossesse.

Pola au cabinet

POLA RAPID

Pola Rapid 6% 1 Patient Kit 1 seringue de 2,8 ml de gel Pola Rapid	7700510
Pola Rapid 6% 3 Patient Kit with Optragate 3 seringues de 2,8 ml de gel Pola Rapid	7700511

Please note: each pack includes accessories.
CP: Carbamide Peroxide HP: Hydrogen Peroxide

SUPPORT DE BLANCHIMENT POLA

1 support 1 fixation pour SDI Radii Plus 1 fixation pour SDI Radii Xpert Accessoires	7700989
---	---------

Pola à domicile

POLA DAY

Pola Day Mini Kit 4 × 1.3g (6% HP)	7700357
Pola Day 10 × 1.3g Syringe Kit (6% HP)	7700359

POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners 4 × 3g seringues (10% CP)	7700556
--	---------

POLA LIGHT

Pola Light 4 × 3g Pola Day seringues (6% HP)	7700985
---	---------

POLA LIGHT DISPLAY STAND

1 x Stand	7700979
-----------	---------

POLA NIGHT

Pola Night Mini Kit 4 × 1.3g (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 × 1.3g Syringe Kit (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377

BOÎTIERS UNITÉS

Recharge de 20 pièces	7750008
-----------------------	---------

PLAQUES THERMOFORMABLES

Recharge de 20 pièces	7750005
-----------------------	---------

SPACER RESIN

2 seringues de 1g de Résine d'espacement	7700012
--	---------

POCHETTES POLA ZIPLOCK:

10 pochettes Ziplock	7700999
----------------------	---------


Pola en déplacement

POLA LUMINATE


1 tube de 5,5 ml de Pola Luminat	7700092
----------------------------------	---------

Matériel de marketing gratuit


Outils marketing pour la promotion du blanchiment dentaire auprès des patients.

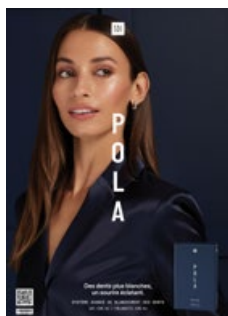

Affiche Pola Day
Code article M110028

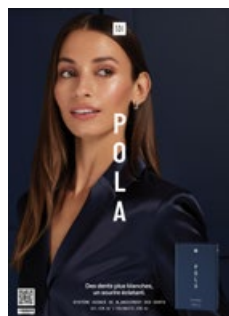

Affiche Pola Night
Code article M110029

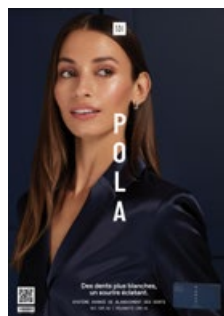

Affiche Pola Rapid
Code article M110177



Affichage Pola avant et après
Code article M110162



Affichage Pola avant et après
Code article M110172



Dépliant pour le patient Pola
Code article M110161



Carte de rendez-vous Pola
Reorder M110160



Dépliant pour le patient Pola Light
Reorder M110166



Pola Sac
Code article M100332



Pola Sac
Code article M100331



Autocollant de fenêtre Pola
Code article M110059



Pola salle d'attente USB video
Code article M100245



Plv personnalisée

Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via téléchargement sur: www.sdi.com.au

SDI

SDI limited est totalement dédiée dans la recherche et le développement, la production et le marketing de produits spécialisés pour le Dentaire. Les produits proposés par SDI sont une combinaison d'innovation et d'excellence pour proposer des matériaux de restauration idéal pour les dentistes.

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE

by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1 800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRESIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
IRLANDE 00 353 (83) 806 0228
ITALIE 00800 0225 5734
ESPAGNE 00800 0225 5734
ANGLETERRE 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
[@pola_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Our plus d'informations consultez :
polawhite.com.au



05-2025

M110164 A