



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



i

SCHWERT Scheren

SCHWERT Premium Scheren

- speziell gehärteter Stahl
- Präzise Schnittführung über die gesamte Blattlänge
- leichter Gang

SC Scheren (SuperCut)

- spezieller, extrem scharfer Schnittwinkel für verringertes Trauma und weniger Kraftaufwand
- eine Schneide Mikroverzahnt um Abrutschen von Faden und Weichgewebe zu verhindern
- Goldmarkierung an einem Griff

TC Scheren

- sehr lange Lebensdauer durch Hartmetalleinsätze auf beiden Schneiden, speziell bei hartem Nahtmaterial
- Goldmarkierung an beiden Griffen

SCHWERT scissors

SCHWERT Premium scissors


- special steel and hardening
- precise cutting from the tip along the whole blade
- smooth cutting

SC scissors (SuperCut)


- very sharp – less effort and trauma due to a special cutting edge
- one blade micro serrated to avoid suture and tissue slippage
- one handle gold coated

TC scissors

- long durability due to Tungsten carbide inserts on both blades, especially for hard sutures
- both handles gold coated

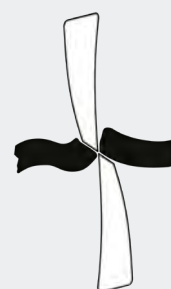

Normale Scheren
Ordinary scissors

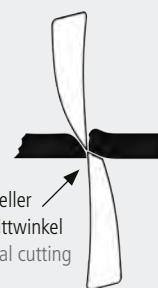

spezieller
Schnittwinkel
special cutting
edge

SC Scheren
SC scissors



i

ULTRA Scheren

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten und widerstandsfähigen Oberfläche:

- Extrem harte und glatte Oberfläche für präzisen Gang und geringen Verschleiß
- SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen
- Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im ausgeleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe
- Besonders beständig gegen Chemikalien in der Wiederaufbereitung
- Als „La Grange“ Figur erhältlich › Anatomische S-Form für guten Zugang in allen Quadranten

ULTRA scissors

In today's practice perfectly functioning instruments are required to save time and still allow more precise treatments. The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors combine the advantages of known SuperCut with an extremely hard and durable surface:

- Extremely hard and smooth coating for a precise feeling and less wear
- SuperCut finish for razor sharp cutting and less trauma. One blade micro serrated so that thread or soft tissue will not slip off
- The low-glare black coating improves visibility and provides excellent contrast to the gingiva. For even more precise surgical interventions
- Highly resistant to chemicals and thus excellently clean and sterilizable
- Available as "La Grange" figure › Anatomical S-shape for easy access in all mouth areas

- Zahnfleischscheren
- Medical gum scissors



1110-400B

ULTRA
11,5 cm
gerade
straight

1110-400

SC

1180

TC



1111-400B

ULTRA
11,5 cm
gebogen
curved

1111-400

SC

1181

TC



1133-400B

LA GRANGE ULTRA
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-400

LA GRANGE SC

1133-200

LA GRANGE TC

UpDate!

Chirurgie • Surgery

ULTRA Scheren • ULTRA Scissors

ULTRA

SCHEREN
SCISSORS



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



1117-400B

GOLDMANN-FOX **ULTRA**
13,0 cm
gebogen
curved

1117-400

GOLDMANN-FOX **SC**

1185

GOLDMANN-FOX **TC**
13,0 cm
mikroverzahnt, gebogen
micro serrated, curved



Ideale Länge für
den Molarenbereich.
Perfect length for
molar areas.

1125-400B

JOSEPH **ULTRA**
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400

JOSEPH **SC**
14,0 cm
gebogen
curved



1139-400B

METZENBAUM
ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1139-214

METZENBAUM **TC**

