

Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée


Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique.

Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.



Easyslide est synonyme d'un affûtage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimum de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissu
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille

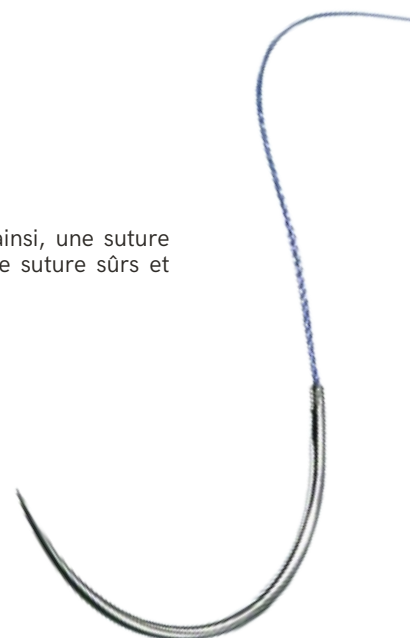

RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.



Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc



Étape de manipulation :



Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension



Transfert du RacePack vers la zone stérile



Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec le porte aiguille



Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille	Corps de l'aiguille	Pointe de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Précisions
D 3/8 cercle	R rond	T diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	f aiguille flat
H 1/2 cercle	S triangulaire	C micropointe		s aiguille renforcée
		MP pointe de précision		ss très renforcée
				v aiguille sécable
				v aiguille noire
H	R	C	26	


HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm



Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur



Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus

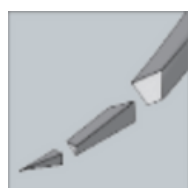

Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati



Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.



Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde



L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe




Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son corps carré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant



Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

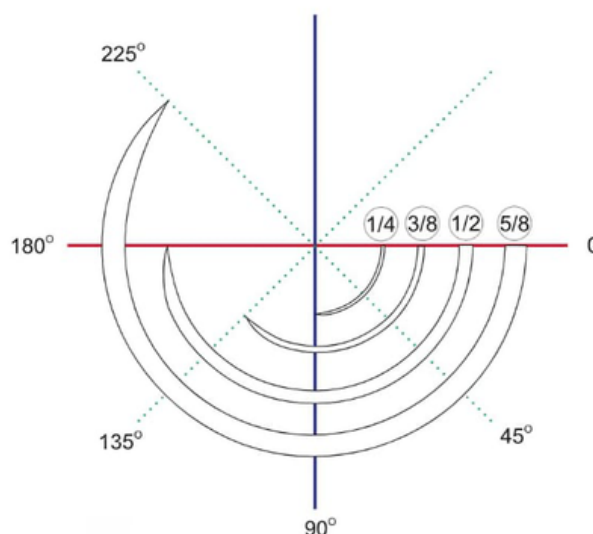


Codage des articles permettant l'identification du contenu des boîtes :

M = Boîte de 6 G = Boîte de 12 B = Boîte de 24 C = Boîte de 36

Dafilon

Le fil nylon pour une suture douce

Comme toute suture de nylon, bien que non résorbable, une hydrolyse progressive de la suture peut se produire, entraînant une diminution de sa résistance dans le temps.

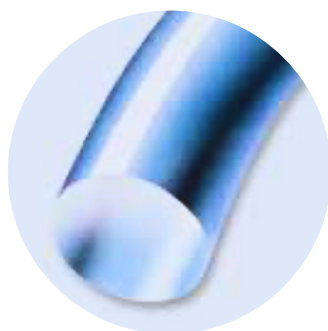

Structure	Monofilament
Couleur	Bleu
Composition	Polymères de polyamide 6/6.6 (bleu)
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 11/0 à USP 5/0
Résorption	Non résorbable
Sterilisation	Oxyde d'Ethylène + Irradiation gamma

Indications

- Transplantation du tissu conjonctif
- Couverture de récession
- Chirurgie apicale
- Cystectomie
- Implants oraux
- Extractions dentaire
- Ostéotomie

Avantages

- Passage intratissulaire en douceur
- Risque d'infection réduit
- Souple, aisé à manipuler et à nouer
- Excellente histocompatibilité

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0
DS 12 	45 60 Bleu	C0932078 *C0935050	C0932086 C0935069	
DS 16 	45 75 Bleu	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107
DS 19 	45 75 Bleu	C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212
DS 24 	45 75 Incolore	C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360

Aiguille :

Aiguille Sarlat

Sertissage Barcelona

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36

Composition identique à celle de Ethilon (Éthicon)
Composition identique à celle de Filapeau - Peterlon (Peters)