

Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique. Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.

Easyslide



Easyslide est synonyme d'un affûtage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimum de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissu
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille



RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.



Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc



Étape de manipulation :



Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension



Transfert du RacePack vers la zone stérile



Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec la porte aiguille




Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :


| Courbure de l'aiguille | | Corps de l'aiguille | | Pointe de l'aiguille | | Longueur de l'aiguille | Précisions | |
|------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|------------|--------------------|
| D | 3/8 cercle | R | rond | T | diamant | Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm. | f | aiguille flat |
| H | 1/2 cercle | S | triangulaire | C | micropointe | | s | aiguille renforcée |
| | | | | MP | pointe de précision | | ss | très renforcée |
| | | | | | | | v | aiguille sécable |
| | | | | | | | v | aiguille noire |
| H | | R | | C | | 26 | | |

HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm

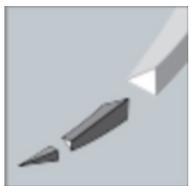

Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur

Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus

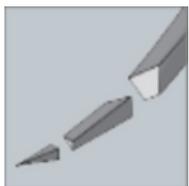

Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati

Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.




Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde

L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.




Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe

Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son corps scléré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.

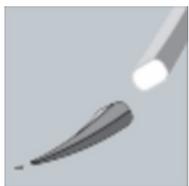

Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant

Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

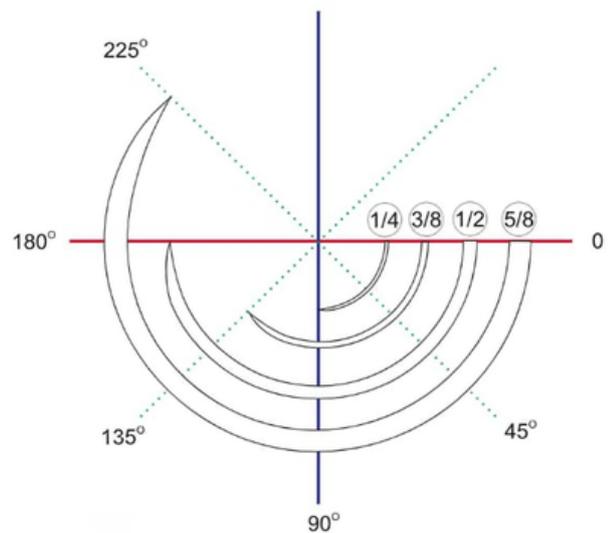

Codage des articles permettant l'identification du contenu des boîtes :

M = Boîte de 6

G = Boîte de 12

B = Boîte de 24

C = Boîte de 36

Monosyn

Le fil professionnel pour une suture immaculée



| | |
|----------------------|--|
| Structure | Monofilament |
| Couleur | Violet / Incolore |
| Composition | Glyconate : 72% glycolide - 14% carbonate de triméthylène - 14% caprolactone |
| Enduction | Glycolide, L-lactide, stearate de calcium |
| Origine | Synthétique |
| Tailles | USP 7/0 à USP 2/0 |
| Résistance | 50% après 14 jours |
| Résorption | 60 à 90 jours - Moyen terme |
| Stérilisation | Oxyde d'Ethylène |

| Indications | Avantages |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Chirurgie digestive Chirurgie urologique Chirurgie gynécologique La muqueuse buccale Les tissus cutanés et sous cutanés | <ul style="list-style-type: none"> Grande souplesse Excellente tenue du nœud Absence de capillarité Pas d'effet de scie Suture polyvalente |

| Longueur mm | Longueur cm | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| HR 13 | 70 Violet | | C2022008 | | |
| HR 17 | 70 Violet | C0022002 | C2022003 | | |
| DRT 18 | 70 Violet | | C0022343 | C0022344 | |
| DS 12 | 45 70 Incolore | | C0023103 C2023413 | C2023414 | |
| DS 16 | 45 Violet 45 70 Incolore | | C2022419 C0023563 C2023423 | C2023303 C2023424 | C2023425 |
| DS 19 | 45 70 Violet 45 70 Incolore | | C0023503 C2023403 | C2022504 C2022204 C2023204 C2023404 | *C2022205 C2023205 C2023405 |
| DS 24 | 70 Violet 45 70 Incolore | | *C0023114 | *C0023115 C2023214 | C2022215 C2023215 |
| DSMP 13 | 45 Violet | | C0022433 | | |

Aiguille : **Easyslide**

Aiguille   Sarlac

Sertissage   Barcelona

RacePack : 

C = Boîte de 36

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

Composition identique à celle de Monocryl (Éthicon)
Composition identique à celle de Advantime (Peters)