

Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée


Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique.

Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.



Easyslide est synonyme d'un affûtage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimum de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissus
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille

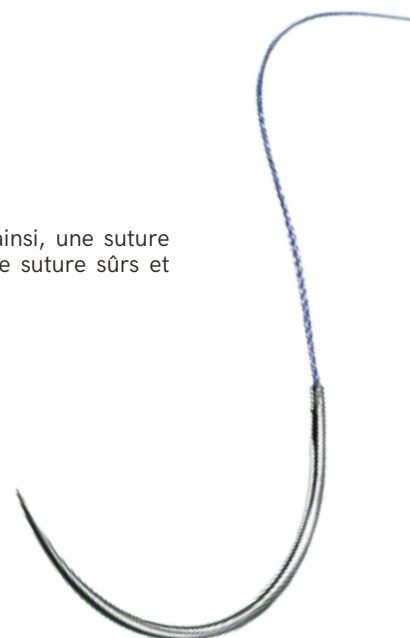

RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.



Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc



Étape de manipulation :



Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension



Transfert du RacePack vers la zone stérile



Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec le porte aiguille



Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille	Corps de l'aiguille	Pointe de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Précisions
D 3/8 cercle	R rond	T diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	f aiguille flat
H 1/2 cercle	S triangulaire	C micropointe		s aiguille renforcée
		MP pointe de précision		ss très renforcée
				v aiguille sécable
				v aiguille noire
H	R	C	26	


HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm



Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur



Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus

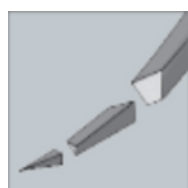

Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati



Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.



Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde



L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe




Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son corps carré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant



Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

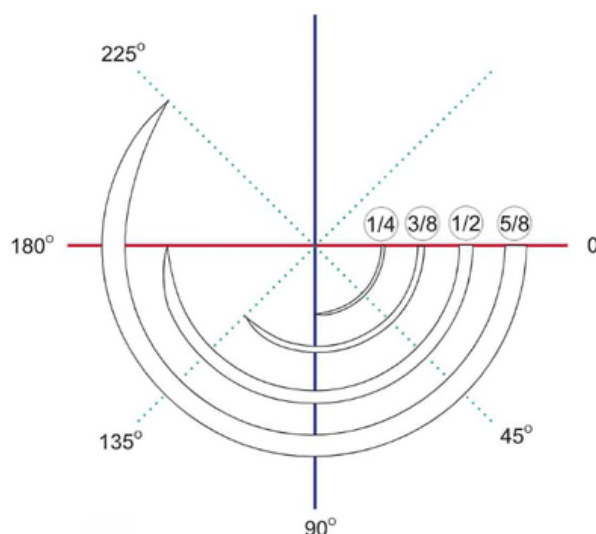


Codage des articles permettant l'identification du contenu des boîtes :

M = Boîte de 6 G = Boîte de 12 B = Boîte de 24 C = Boîte de 36

Novosyn Quick

La suture à résorption rapide offrant le plus de sécurité

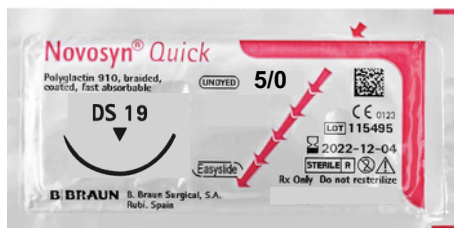

Structure Tressée

Couleur Incolore

Composition PGLA - Polyglactin 910 :
Copolymère de glycolide 90%, L-lactide 10%

Enduction Glycolide, L-lactide, stearate de calcium

Origine Synthétique

Tailles USP 6/0 à USP 2/0

Résistance 50% après 5 jours

Résorption 42 jours - Résorption par hydrolyse - **Court terme**

Stérilisation Irradiation Gamma

Indications

- Sutures cutanées et sous cutanées
- Chirurgie des paupières
- Muqueuse buccale
- Extraction dentaires
- Implants oraux
- Chirurgie apicale
- Ostéotomie

Avantages

- Grande résistance à la traction et excellente tenue des nœuds grâce à un tressage serré.
- Grande souplesse de manipulation due à une enduction homogène.
- Diminution des risques d'infection grâce à sa tresse serrée.
- Toutes les aiguilles de qualité Easyslide*

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0
DS 12 	70 Incolore	C3046202	C3046203	
DS 16 	70 Incolore	C3046212	C3046213	C3046214
DS 19 	45 70 Incolore	C3046219	C3046220 C3046420	C3046221 C3046421
DS 24 	45 70 Incolore		C3046234	C3046535 C3046235

C = Boîte de 36

Aiguille :

Aiguille Sarlat

Sertissage Barcelone

RacePack :