



LE RETRAITEMENT

2 INSTRUMENTS POUR UNE DÉSOBTURATION AISÉE

D-Race



DR1



DR2

- DR1 : Instrument de diamètre 30, conicité 10 % et longueur 15 mm pour le tiers coronaire ; instrument à pointe active ; travailler sur 3-4 mm seulement
- DR2 : Instrument de diamètre 25, conicité 4 %, longueur 25 mm pour les tiers médian et apical ; pour enlever le reste du matériau d'obturation

► Longueurs : DR1 15 mm, DR2 25 mm

► Couple : 1,5 Ncm


► DR 2 : usage unique

► Séquence :

 30/.10 DR1

 25/.04 DR2

Réf. 202840 - Blister de 4 limes (2x2)

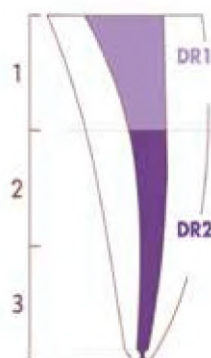

► Réassort de chaque taille disponible - Blisters de 6 limes