

Aiguille Easyslide :

De qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Les aiguilles Easyslide sont le résultat de recherches approfondies en technologie métallurgique et d'expérience clinique. Conception spécifique de la pointe et de la géométrie de l'aiguille. Grande qualité d'alliage 300 Quality Steel.




Easyslide est synonyme d'un affûtage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide avec un minimum de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d'excellents résultats.

- Pas de déformation
- Pas de cassure de l'aiguille
- Un tranchant permanent de l'aiguille : pénétration constante dans le tissu, jusqu'au dernier point
- Géométrie précise de la pointe : excellente capacité de pénétration
- Passage intratissulaire en douceur
- Glissement régulier, précis et atraumatique de l'aiguille à travers le tissu
- Traitement de surface : améliore la pénétration de l'aiguille



RacePack :

BBraun a mis au point son conditionnement de sutures à travers des partenariats de long terme avec des équipes chirurgicales du monde entier.



Système de conditionnement simplifié des sutures :

- Réduction de l'effet mémoire grâce à son bobinage en cercle
- Identification simple du produit
- Accès direct aux sutures, gain de temps pour le personnel du bloc



Étape de manipulation :



Ouverture de l'emballage extérieur non stérile
Large zone de préhension



Transfert du RacePack vers la zone stérile



Préhension de l'aiguille dans l'emballage avec la porte aiguille




Extraction de la suture en tirant vers la droite

Différents types d'aiguilles :

Pour distinguer les différents types d'aiguilles :

Courbure de l'aiguille		Corps de l'aiguille		Pointe de l'aiguille		Longueur de l'aiguille	Précisions	
D	3/8 cercle	R	rond	T	diamant	Correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	f	aiguille flat
H	1/2 cercle	S	triangulaire	C	micropointe		s	aiguille renforcée
				MP	pointe de précision		ss	très renforcée
							v	aiguille sécable
							v	aiguille noire
H		R		C		26		


HRC 26 : Aiguille 1/2 cercle à corps rond avec pointe triangulaire micropointe, longueur 26 mm

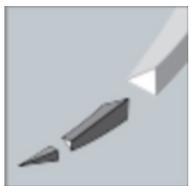

Aiguille DS : 3/8 de cercle
Triangulaire tranchante sur l'extérieur



Aiguille de section triangulaire avec un apex à bord tranchant sur l'extérieur de la courbure de l'aiguille. Conçue pour pénétrer dans les tissus

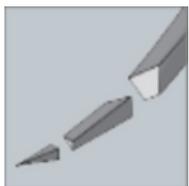

Aiguille DSMP : 3/8 de cercle
Triangulaire pointe de précision à corps aplati



Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant sur l'extérieur. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.



Aiguille HR : 1/2 cercle
Ronde




L'aiguille ronde est conçue pour permettre une pénétration aisée des tissus. Le corps de l'aiguille est aplati pour empêcher l'aiguille de tourner dans le porte-aiguille. Convient parfaitement aux tissus mous. Résistance accrue à la flexion.



Aiguille DRC : 3/8 de cercle
Ronde avec micro pointe




Cette aiguille ronde avec l'extrémité de la pointe triangulaire améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. L'aiguille CV Pass avec son corps scléré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion.

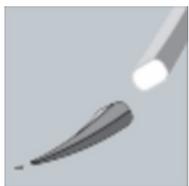

Aiguille DRT : 3/8 de cercle
Ronde avec pointe de diamant





Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

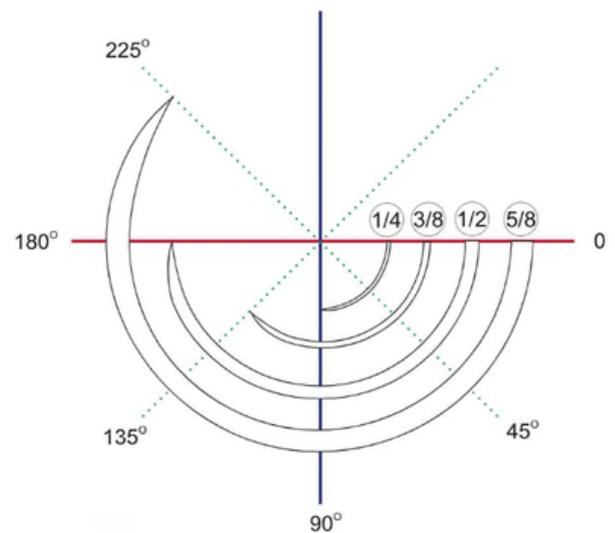

Codage des articles permettant l'identification du contenu des boîtes :

M = Boîte de 6 G = Boîte de 12 B = Boîte de 24 C = Boîte de 36

Silkam Le fil de soie naturelle

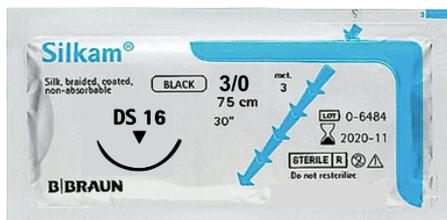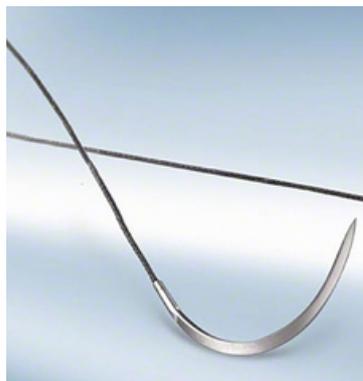

Structure	Tressée
Couleur	Noir ou blanc
Composition	Filaments naturels de soie
Enduction	Cire et silicone. Cire d'abeille pure. Cire raffinée de parafine.
Origine	Soie naturelle - Cocons de vers à soie
Tailles	USP 5/0 à USP 8/0
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation gamma

Indications

- Greffes de tissu conjonctif
- Recouvrement de récessions
- Chirurgie apicale
- Cystectomies
- Implants oraux
- Extractions dentaires
- Ostéotomies

Avantages

- Manipulation simple : matériel de suture flexible et souple
- Bonne tenue des nœuds
- Passage intratissulaire en douceur

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0	2/0
HS 21 	75 Noir			C07644248	
DS 12 	45 75 Noir	C0762091 *C0765597	C0762083 C0765082	C0762075 C0765074	
DS 16 	45 75 Noir	C0762121 C0764124	C0764132	C0764140	
DS 19 	75 Noir	C0765198	C0765201	C0765210	C0765228
DS 24 	75 Noir			C0762350	

Aiguille :

Aiguille Sarlat

Sertissage Barcelone

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36

Composition identique à celle de Silk (Ethicon)